


Hill-Rom NP150 Viskoelasztikus szivacsmatrac

A beteg alakjához igazodó, hatékony és biztonságos felfekvést megelőző matrac

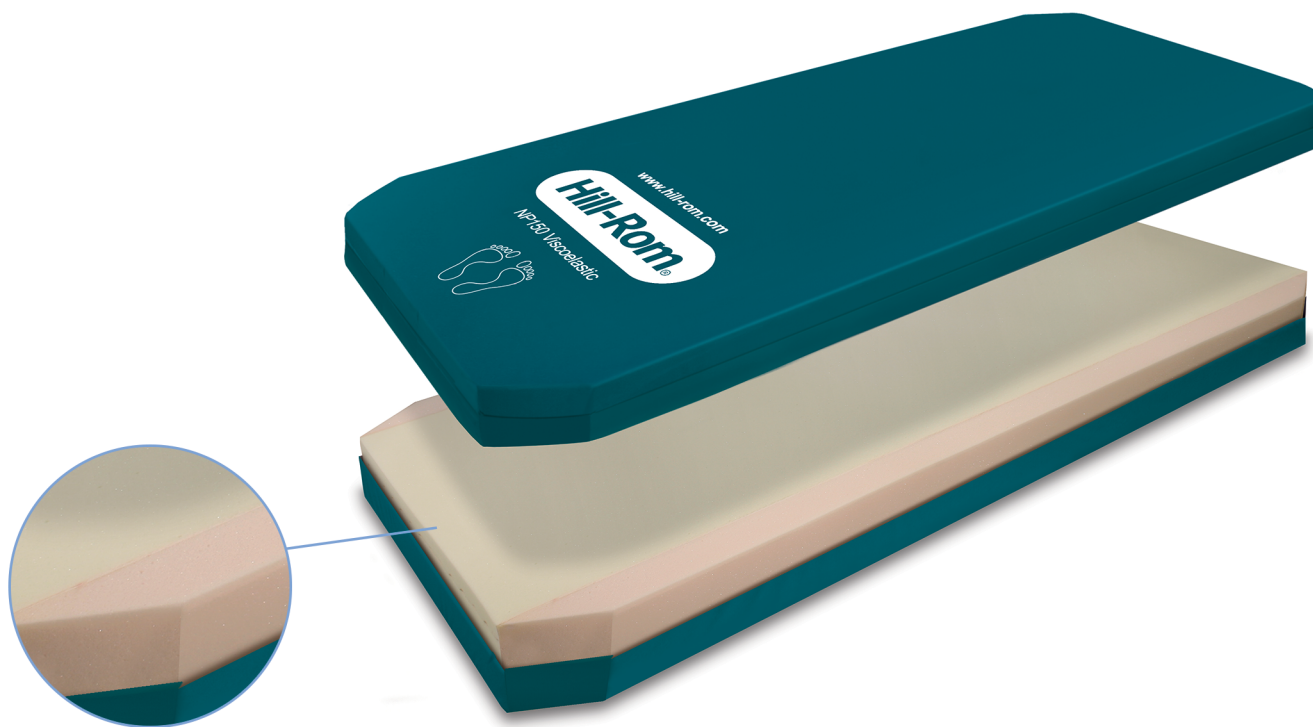

Előnyök és jellemzők

- Igazodik a beteg alakjához és csökkenti a felületi nyomást
- Hegesztett szélű huzat beépített hordozófogantyúkkal
- Könnyen tisztítható és higiénikus
- Nagysűrűségű oldaltámaszok a betegbiztonság és könnyebb kiszállás érdekében
- A legtöbb ágykerethez és minden ágypozícióban használható
- Röntgensugár áteresztő és latexmentes

Hill-Rom NP150 Viszkoelasztikus szivacsmatrac

Hőérzékeny viszkoelasztikus szivacsmatrac

A Hill-Rom NP-150 típusú viszkoelasztikus matracot kifejezetten a felfekvések megelőzésének céljából fejlesztették ki. A hőmérsékletre érzékeny viszkoelasztikus szivacs felveszi a betege alakját, egyenletesen elosztva a súlyt és igazodik a beteg testkontúrájához, növelve a beteg kényelmét és a nyomáeloszlást. A legtöbb ágykerethez és minden ágypozícióban használható.

A teljesen zárt matrac vízálló, de légáteresztő bielasztikus bakteriosztatikus és fungosztatikus poliuretán huzattal készül, mely lehetővé teszi a könnyű és hatékony tisztítást és fertőtlenítést, ezáltal jelentősen növelve a beteg és ápolói környezet higiéniáit biztonságát.



A Hill-Rom NP150 viszkoelasztikus szivacsmatrac megnövelt méretben is elérhető

Standard méret: 198 cm

+5 cm

Műszaki jellemzők

Matrac (egyéni méretek választhatók)

Hossz	198 vagy 203 cm
Szélesség	85 vagy 90 cm
Magasság	14 cm

Jótállás

A Hill-Rom 2 év jótállást vállal a matraca és a huzatra.
A jótállás részleteiről kérjük érdeklődjön a helyi Hill-Rom képviselőnél.

Biztonságos teherbírás

(Maximum betegsúly)	250 kg
---------------------	--------

Szegély

Hegesztett

Fertőtlenítés

Klór bázisú szerek használhatóak. A koncentráció mértéke nem haladhatja meg az 1000 ppm hígítású értéket.

A Hill-Rom fenntartja magának a jogot a típusok, a kivitel és a jellemzők előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására.
Az egyedüli Hill-Rom jótállás a termék eladása esetére vonatkozó jótállás.
©2008 Hill-Rom Services, Inc. – AZ ÖSSZES JOG FENNTARTVA.

Magyarországi képviselő:



Premier G Med Kft.

1026 Budapest Hidász u. 1.
www.premiergmed.hu

Tel: +36 (1) 391-4030
Fax: +36 (1) 398-0687
Mobil: +36 (20) 849-5524

Enhancing outcomes for
patients and their caregivers:

Hill-Rom.