

Mi a teendő, ha kiürült az infúziós pumpa?

Önnel kezelőorvosa személy szerint egyeztetette, hogy lesz eltávolítva az előírt idő után a pumpa. Amennyiben azt be-szélték meg, hogy Ön húzza ki, úgy ezt a folyamatot az Önt kezelő nővér pontosan meg fogja mutatni.



Az infúziós pumpa veszélyes hulladék! Soha ne dobja ki otthon!

Otthoni eltávolítás esetén a pumpát tegye be egy nylon zacskóba és a következő kezelésre vigye magával és adja oda az Önt kezelő nővérnek.

A kemoterápia mellékhatásairól Önt kezelőorvosa részle-tesen tájékoztatta.



Ön a kemoterápiás kezelését egy úgynevezett egy-szerhasználatos, hordozható infúziós pumpa segít-ségével kapja meg a kezelőorvosa által előírt proto-kollnak megfelelően. Az eszköz elem vagy villamos csatlakozás nélkül működik valamint könnyen kezel-hető, biztonságos és csak néhány egyszerű utasí-tást kell betartania és követnie.



www.premierved.hu
info@premierved.hu



TANÁCSOK A HORDOZHATÓ INFÚZIÓS PUMPÁVAL KEZELT BETEGEK RÉSZÉRE



„Biztonság a terápiában”

- egyenletes gyógyszerbevitel
- megfelelő dózis
- biztosítja az előírt kezelés időtartamát

A pumpa működése

A pumpa egy átlátszó, kemény műanyag burkból és egy benne lévő elasztomer ballonból áll. A dupla falu technológiának köszönhetően, a pumpa belső ballonjának megsérülése esetén is megfelelő biztonságot nyújt az Ön számára. A pumpa a hatóanyagot egy infúziós vezetéken keresztül egyenletesen a feltüntetett sebességgel juttatja el az Ön vénájába vezetett műanyag, flexibilis eszközön keresztül.

Az előre megbeszélt lefolyási időt minden esetben tartani kell!

A rendszer elemei





2. Szűrő és légtelenítő elem: garantálja a szakszerű szűrést és légtelenítést. Arra szolgál, hogy az esetlegesen megjelenő légbuborékok ezen keresztül távozzanak. Kérjük, hogy a légtelenítő elemen található mikronyílást NE takarja el!



1. Kapilláris szűkítő elem: garantálja a biztonságos gyógyszerbevitelt, mely biztosítja a megfelelő, egyenletes áramlási sebességet. Hozzásegít a terá-

piában előírt mennyiség pontos beviteléhez. (Fontos: a kapilláris elemet a bőrfelületre kell rögzíteni, azaz testhőmérsékleten kell tartani.)

Áramlási görbe a kapilláris szűkítő elem használatával

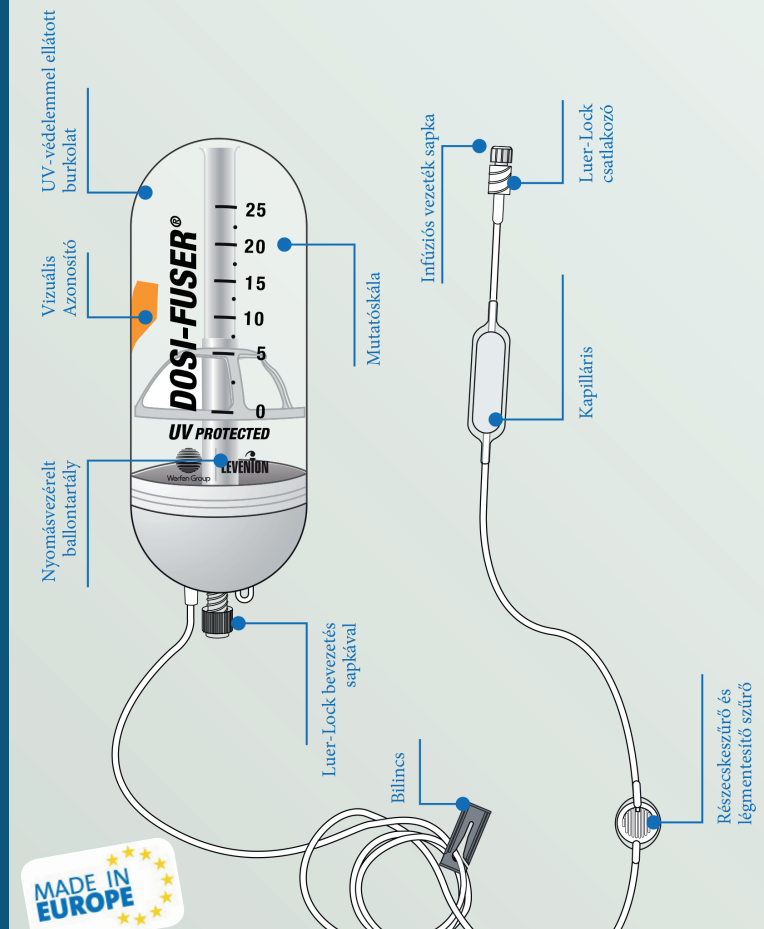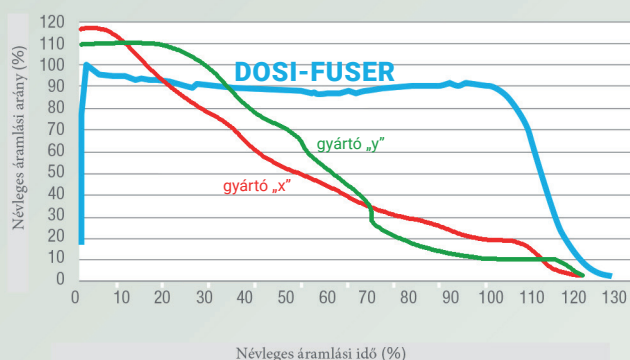

Mikor kell segítséget kérni?

- ha a ballon túl gyorsan, vagy túl lassan ürül (ezt feltétlenül beszélje meg a kezelőorvosával/ az Önt kezelő nővérrel)
- az eszköz kívülről, a csővezeték nyirkos, vagy nedves (úgy tűnik ereszt valahol)
- vér van a csővezetékben
- ha a ballon láthatóan sérült
- ha a kanül körül a bőr duzzad, fáj, vagy az Ön vénájába vezetett műanyag eszköz (kanül) láthatóan kicsúszik a vénából

Ha kemoterápiás szer kerül a bőrére, azt azonnal langyos, szappanos vízzel mossa le, majd zárja el az eszközt és rakja zacskóba.

Az Önt ellátó osztálytól kapott telefonszámot hívja fel a további teendők megbeszélésére.

Milyen módon ellenőrizzük a pumpát?

A kemoterápia nagyon lassan, meghatározott cseppszámban távozik az eszközből (a ballonba van a kemoterápiás szer betöltve). Az első néhány órában ezért szinte semmit sem lehet látni a ballon méretében bekövetkező változásokból. Az Önt kezelő ápoló meg fogja mutatni, hogyan lehet figyelni az eszköz megfelelő működésére.

Hogyan hordjuk nappal az infúziós pumpát?

Több módon is hordható az eszköz napközben. Nyakba akasztható a táskára ráfűzött zsinórral, de ha a zsinór használata kényelmetlen, az eszköz más kistáskába is helyezhető. Legideálisabb az eszközt kb. a hónalj középvonalában tartani. Az eszközt a lehetőségekhez képest mellkas, derékmagasságban kell tartani és nem érheti közvetlen napfény és hő, valamint nem kerülhet víz alá.



A tartály levegőnyílásába semmit sem szabad bedugni! Ügyeljünk, hogy a csővezeték ne törjön meg.

Lehet-e fürdeni, tusolni infúziós pumpával?

Mindkettőt lehet! Az eszköz nedves lehet, de ne kerüljön víz alá. A vénába vezetett műanyag tű kötással van fedve, a kötést lehetőség szerint ne érje víz. Ha mégis átnedvesedik, a gézlapot ki kell cserélni, mert a kanült rögzítő kötszer leázhat.

Elhelyezése alvaskor

Önnel egy magasságban kell tartani az eszközt éjszaka is. Ne legyen se alacsonyan, se magasan (pl padló, vagy Ön melletti párkány nem megfelelő).

A legtöbb ember elég kényelmesnek találja, hogy a párnája alá tegye be.