



Anatome: forradalmian új...

Ergonómikus kialakításával, kiváló kezelhetőségével és kis súlyával az Anatome nem csupán egy újabb kórházi szék. A beteggondozás nélkülözhetetlen eszközévé vált és nagy kényelmet jelent a gondozó személyzet számára is.

- A BETEG ALAKJÁHOZ IGAZÍTHATÓ
- MEGELŐZI A NYOMÁS HATÁSÁRA KIALAKULÓ FEKÉLYESEDÉST
- ERGONÓMIKUS ÉS KÖNNYEN KEZELHETŐ

Az Anatome megkönnyíti a beteg szállítását



Az Anatome rugalmassága (lehajtható fej- és kartámaszok, magasságállítás) garantálja a teljesen biztonságos betegszállítást.

Az Anatome növeli a beteg kényelmét és biztonságát



Az Anatome szék idomul a beteg alakjához, és számos helyzet-beállítást tesz lehetővé. A beteg biztonságos környezetben pihenhet.

Az Anatome hatékonyabbá teszi a beteggondozást

A tartozékok (AC 901A nyaktámasz, AC 926A infúziós állvány, AC 969P állítható asztallap) széles választéka mindenkor magas színvonalú gondozást tesz lehetővé.

A nagyobb kényelem és a helyi nyomás hatására kialakuló fekélyesedés elkerülése érdekében az Anatome szék az AC 947A „kényelem - megelőzés” ülőpárnával van felszerelve.



Műszaki adatok


SM647A: fix magasság

- Alapkeret: epoxi bevonatú hegesztett szerkezet
- Ülész/háttámla és fejtámasz: cső keret és melegen alakított ABS lapok
- Helyben öntött, levehető, varrat nélküli hab párnázat
- Beállítható, levehető, billenthető fejtámasz
- Beépített infúziós állvány és dréntasak tartók
- Négy Ø125 mm görgő, ebből kettő fékezhető
- Öntött, hőre lágyuló műanyagból készült, levehető lábtámasz
- Hátsó fogantyúk
- Billenthető hátrész, kétoldali kezelőszervekkel
- PVC impregnálású huzat tetszőleges színben
- Megjegyzés: e modell fix magassága 51 cm

SM647B: változtatható magasság

A 647A modell jellemzőin túlmenően ennél a modellnél még az alábbiak találhatók:

- Ütközőként is szolgáló két pedállal működtethető központi fékrendszer
- Kormánygörgő rögzítő rendszerrel Négy Ø125 mm görgő, félkör keresztmetszetű gumibronccsal, ezekből egy kormánygörgő automatikus rögzítéssel
- Hidraulikus emelés-süllyesztés a 455 és 490 mm közötti tartományban a két oldalon elhelyezett pedálok útján; ideális megoldás a környezet, a szállítás és a sokirányú gondozás szempontjából
- Az ülés- és hát-szekciók hátrabilenthető, ami ideális kényelmet és biztonságot nyújt

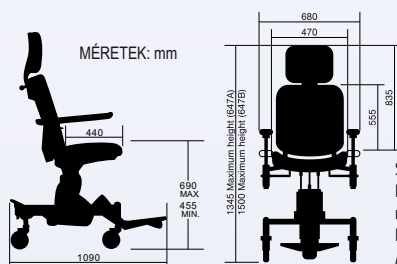

SZABVÁNY-MEGFELELŐSÉG:
D 60-070, D 61-070 - NF EN 1021-1, NF EN 1021-2
megfelel a tűzvédelmi szabványokra vonatkozó
D3-89 GP/CP ajánlásnak.
A műanyag fej- és lábtámaszok osztálya M1F2

Hill-Rom®

Enhancing Outcomes for Patients and Their Caregivers.™

Magyarországi képviselő:

Premier G. Med Capital Kft.
1037 Budapest, Virág Benedek u. 35.
Tel: +36 (1) 391-4030
Fax: +36 (1) 398-0687
Mail: premiergmed@premiergmed.hu
Web: www.premiergmed.hu



www.hill-rom.com